

# Bienestarás

Aparatos de electroterapia y magnetoterapia profesionales diseñados para que los puedas utilizar en casa.

 **efisioterapia**  
**shop**

Venta online exclusiva en:

**[www.efisioterapia.shop](http://www.efisioterapia.shop)**



# MANUAL DE USO

---

*MNPG77-03 Edición 25/08/21*

Colchoneta para magnetoterapia

# OSTEOMAT

*I.A.C.E.R. Srl*

*[www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)*

**I.A.C.E.R. Srl**

Via S. Pertini 24/A – 30030

Martellago (VE) ITALIA

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

correo electrónico: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it)

<http://www.itechmedicaldivision.com>

Índice.....	3
<b>Introducción.....</b>	<b>4</b>
Información técnica.....	5
<b>Características técnicas:.....</b>	<b>5</b>
.....	6
Modo de empleo.....	6
<b>Instrucciones de uso de Osteomat.....</b>	<b>6</b>
Etiquetado.....	6
<b>Mes/Month.....</b>	<b>7</b>
<b>Año/Year.....</b>	<b>7</b>
<b>Símbolos:.....</b>	<b>7</b>
Cuidado de Osteomat.....	8
<b>Limpieza de Osteomat.....</b>	<b>8</b>
<b>Transporte y almacenamiento.....</b>	<b>8</b>
<b>Información para la eliminación.....</b>	<b>9</b>
<b>Asistencia.....</b>	<b>9</b>
<b>Garantía.....</b>	<b>9</b>

## **Introducción**

La colchoneta **OSTEOMAT** es la nueva colchoneta para tratamientos de magnetoterapia de baja frecuencia. Esta colchoneta surge de la necesidad de tratar simultáneamente varias partes del cuerpo y durante tiempos de terapia prolongados.

Es conocida la eficacia de la magnetoterapia en la recuperación de las condiciones fisiológicas de equilibrio de las estructuras celulares. Los campos magnéticos pulsados, de hecho, actúan sobre las membranas celulares favoreciendo el intercambio iónico entre los dos lados de la membrana. Esto lleva a la restauración del potencial transmembrana correcto, que es esencial para garantizar el suministro de nutrientes dentro de la célula.

A nivel de órganos y estructuras anatómicas, estos efectos se traducen en analgesia, reducción de la inflamación y estimulación de la reabsorción de edemas.

Además, la magnetoterapia de baja frecuencia está especialmente indicada para la estimulación de la regeneración de fracturas y para ralentizar el proceso de disminución de la densidad ósea provocado por la **osteoporosis**.

La osteoporosis, que se ha convertido en un fenómeno social creciente, implica la necesidad de intervenir sobre la arquitectura esquelética en su conjunto. En este sentido, la posibilidad de utilizar una colchoneta permite intervenir de forma sistémica en todo el organismo.

La nueva colchoneta **OSTEOMAT** representa, por tanto, la herramienta ideal para tratar varios segmentos corporales en una única sesión, gracias a su gran facilidad de uso y extrema flexibilidad.

El dispositivo está clasificado como clase I, de acuerdo con la regla 1 (4.1) prevista en el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios.

UDI-DI básico: 8019781PEMFLFMATPX

UDI-DI: (01)08019781112507




**Características:**

- Tamaño completo de la colchoneta: 160x65x2 cm;
- 4 sectores activos;
- 2 cables de conexión;
- Compatible con los modelos MAG2000 y modelos LaMagneto;
- Funda de la colchoneta de tela no tejida (2 piezas).

La colchoneta Osteomat consta de 4 sectores activos, que contienen 2 solenoides cada uno, para un total de 8.

Atención: se recomienda aplicar en la colchoneta la funda de tela no tejida antes de su uso. La configuración de Osteomat está diseñada para estimular las zonas del cuerpo (hombros, columna, pelvis) que se ven más afectadas por una reducción de la masa ósea, síntoma típico de la osteoporosis.


Consulte la imagen siguiente para ver la disposición de los solenoides (indicados por los círculos) dentro de Osteomat.

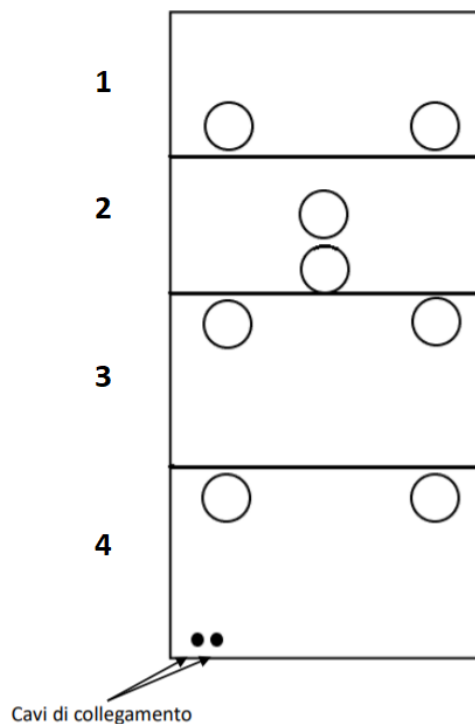

Hay que colocarse situando los hombros en la sección 1 y las piernas en la sección 4.

El lado terapéutico corresponde al que se muestra en la foto de abajo:

Lado terapéutico con los cables que salen de la

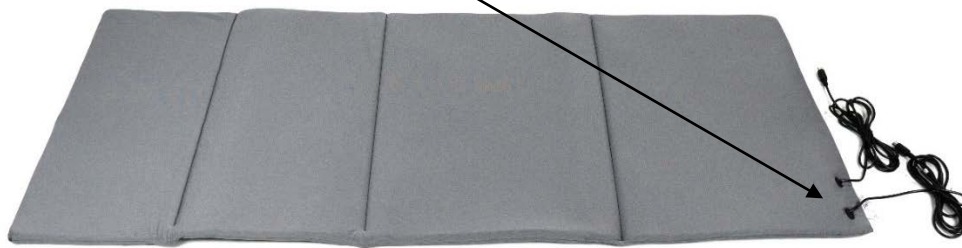

Modo de empleo

### ***Instrucciones de uso de Osteomat***

*Para utilizar la colchoneta Osteomat, simplemente siga los siguientes pasos sencillos:*

- 1. Conecte los dos cables de la colchoneta respectivamente a las dos tomas CH1 y CH2 situadas en el panel de la parte superior del aparato en uso (dispositivo de la familia MAG2000 o de la familia LaMagneto);*
- 2. Inicie el programa elegido siguiendo las instrucciones específicas que se proporcionan en el manual de uso del dispositivo;*
- 3. Colóquese sobre la colchoneta, prestando atención a acostarse del lado indicado como terapéutico por la etiqueta correspondiente (lado por donde salen los cables de conexión).*



*Siga las advertencias indicadas en los manuales de uso de los productos de la familia MAG2000 o la familia LaMagneto.*

Etiquetado

Etiqueta 1





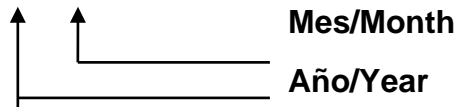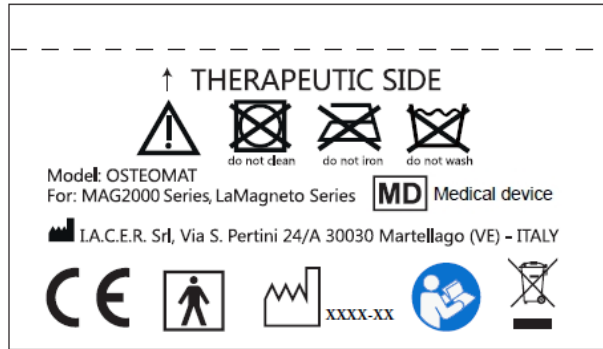




**Etiqueta 1**



**Símbols**

Símbolo	Significado
	Logotipo del fabricante.
	De acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2017/745
	Datos del Fabricante.
	Fecha de fabricación (AAAA-MM).
	Producto sanitario
	Siga las instrucciones de uso.
	Directiva RAEE para la eliminación de residuos electrónicos.



Símbolo	Significado
	Parte aplicada tipo BF.
	Temperaturas permitidas (temperaturas de almacenamiento, en el embalaje).
	Humedad relativa (humedad relativa de almacenamiento, en embalaje).
	Preste atención, peligro.
	No secar.
	No planchar.
	No lavar.

### Cuidado de Osteomat

#### **Limpiar de Osteomat**

Para la limpieza de Osteomat se recomienda desconectar la colchoneta del dispositivo antes de realizar cualquier operación. Limpie la tela con un paño humedecido con agua y jabón neutro y espere que se seque por completo antes de volver a utilizar la colchoneta para una sesión terapéutica.


#### **Transporte y almacenamiento**

No se requieren cuidados particulares durante el transporte. En cuanto al almacenamiento, el equipo está protegido hasta las siguientes condiciones ambientales:

temperatura ambiente	de +5 a +40 °C
humedad relativa	del 15 al 93%

**Información para eliminación**



El producto está sujeto a la normativa RAEE (presente en la etiqueta con el símbolo ) sobre recogida selectiva: para desechar el producto, use áreas especiales equipadas para la recogida de material electrónico contactando con las autoridades competentes de su país o directamente con el fabricante.

**Asistencia**

El fabricante es el agente exclusivo para intervenciones de asistencia técnica en la colchoneta terapéutica Osteomat. Para cualquier intervención de asistencia técnica, comuníquese con:

**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via S. Pertini, 24 / a • 30030 Martellago (VE)

Tel. +39 041.5401356 • Fax +39 041.5402684

**Garantía**

Osteomat está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía queda anulada en caso de manipulación, falta de cuidado y uso inadecuado de la colchoneta, y en caso de intervención en la misma por parte de personal no autorizado por el fabricante o por el distribuidor autorizado.







**I.A.C.E.R. Srl**

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it) - PEC: [iacer@pec.it](mailto:iacer@pec.it) - Web: [www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)

